

GÉZATONE

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

BIO SONIC 1007

УЗ ПИЛИНГ

ФОНОФОРЕЗ / МИКРОМАССАЖ

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

МИКРОТОКИ

ХРОМОТЕРАПИЯ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СТИЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ GEZATONE BIO SONIC 1007 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК: УЛЬТРАЗВУКА, ИОННОГО ОЧИЩЕНИЯ И МИКРОТОКОВ.

ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ, УСИЛИВАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ТОНИЗИРУЕТ И УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.



» НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ШЕЛУШЕНИЕ



» КОМЕДОНЫ, РАСШИРЕННЫЕ И ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОРЫ



» ГИПЕРПРОДУКЦИЯ КОЖНОГО САЛА, ЖИРНАЯ, СМЕШАННАЯ КОЖА



» СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ, ПОСТАКНЕ, ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА



» СНИЖЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ, ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ




» НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ, БЛЕДНОСТЬ, ПРИЗНАКИ СТРЕССА, «УСТАЛОЕ» ЛИЦО



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



арт. 1301253

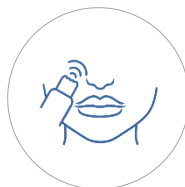

УЗ ПИЛИНГ



ФОНОФОРЕЗ




УЗ МИКРОМАССАЖ




ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ



ХРОМОТЕРАПИЯ

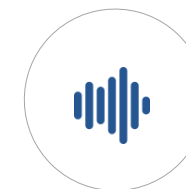


МИКРОТОКИ

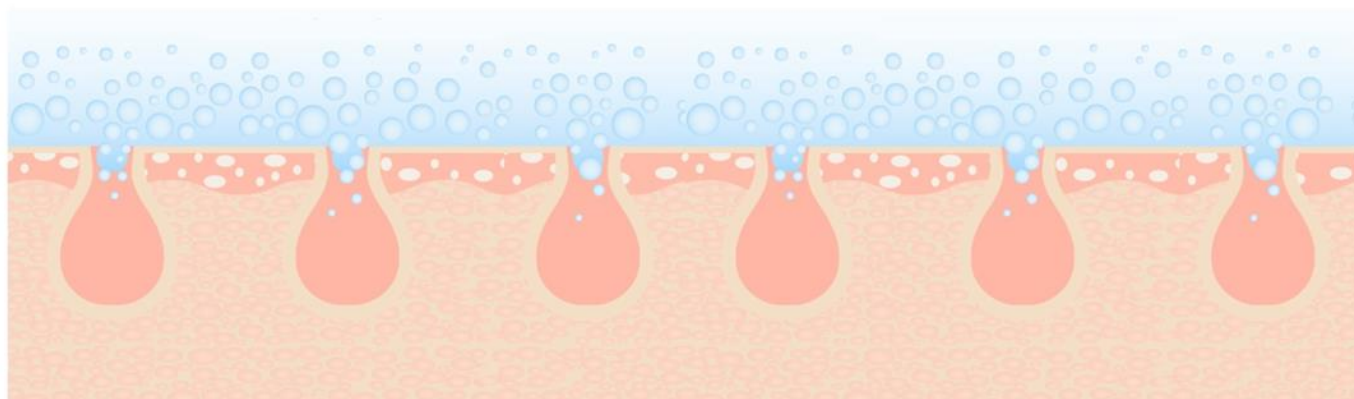

УЗ ПИЛИНГ

УДАЛЕНИЕ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК И
РОГОВЫХ ЧЕШУЕК

ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР И С
ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ

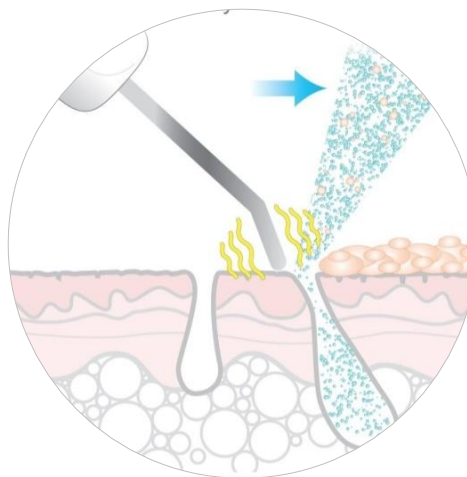

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫХ
ПУЗЫРЬКОВ В ОЧИЩАЮЩЕМ
КОСМЕТИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ

ОЧИСТКА И ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА КОЖИ

РЕЗУЛЬТАТЫ




ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА



УМЕНЬШЕНИЕ
ДИАМЕТРА
ПОР



УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

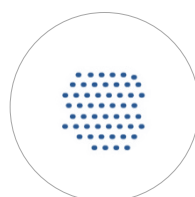

УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА КОЖИ




УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



ОЩУЩЕНИЕ
КОМФОРТА

УЗ ФОНОФОРЕЗ / МИКРОМАССАЖ

УЛЬТРАЗВУК ПОВЫШАЕТ
АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ,
СПОСОБСТВУЕТ ГЛУБОКОМУ
ПРОНИКНОВЕНИЮ,
УДЛИНЕНИЮ ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ

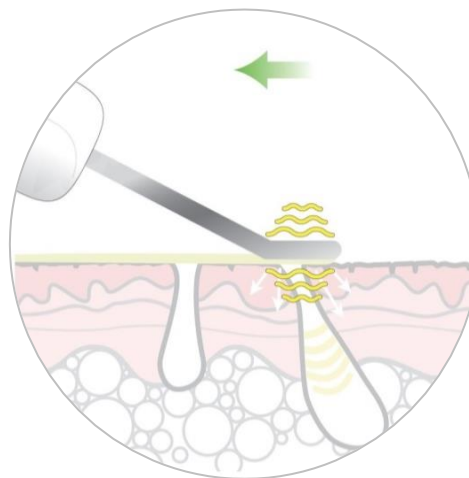


КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ПРОНИКАЮТ В ЭПИДЕРМИС И
ВЕРХНИЕ СЛОИ ДЕРМЫ

ЭФФЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
УСИЛИВАЮТСЯ И ОКАЗЫВАЮТСЯ
БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ

РЕЗУЛЬТАТЫ



ТОНИЗАЦИЯ
КОЖИ

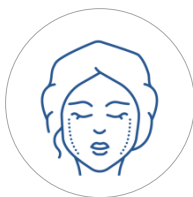

КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



УМЕНЬШЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЙ



ВЫРАВНИВАНИЕ
КОЖНОГО
РЕЛЬЕФА



УСТРАНЕНИЕ
ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ




УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ /
ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ - ОМЫЛЕНИЕ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И
ЛОСЬОНА-ДЕЗИНКРУСТАНТА.

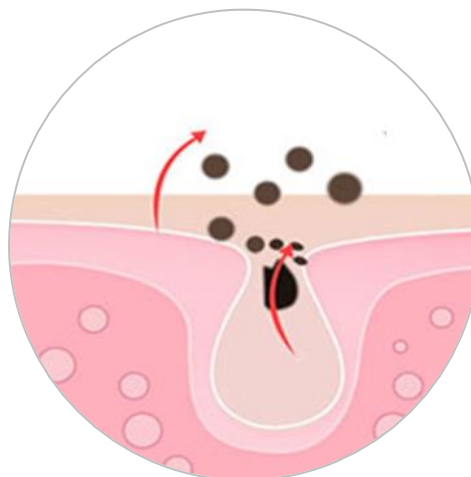

ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ
ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДОЙ.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА И ЛОСЬОНА,
ИДЕТ РЕАКЦИЯ ОМЫЛЕНИЯ
КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОН
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЫЛО И ЛЕГКО
ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОР.

РЕЗУЛЬТАТЫ



СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ




ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ



УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ

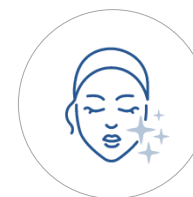


УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

СТИМУЛЯЦИЯ СИНТЕЗА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ КЛЕТОК

УСКОРЕНИЕ СИНТЕЗА БЕЛКОВ И ДНК.
КЛЕТКА «ПРОСЫПАЕТСЯ»
И НАЧИНАЕТ НОРМАЛЬНО
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ.

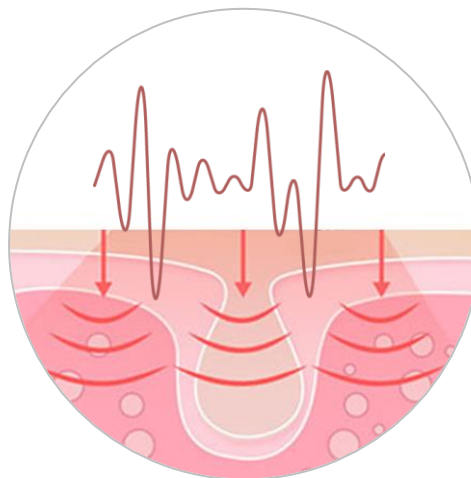

НОРМАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ САЛЬНЫХ
ЖЕЛЕЗ, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ,
ДЕТОКСИКАЦИЯ, ЛИМФОДРЕНАЖ

РЕЗУЛЬТАТЫ



УКРЕПЛЕНИЕ И
ПОДЪЯЖКА
КОЖИ



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ



КОРРЕКЦИЯ
МОРЩИН



КОРРЕКЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ
СУЖЕНИЕ ПОР



УСТРАНЕНИЕ
ЗАСТОЯ И
ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА




УВЛАЖНЕНИЕ
КОЖИ

ХРОМОТЕРАПИЯ / СИНИЙ СВЕТ

ДЛИНА ВОЛНЫ
465 нм

СИНИЙ ЦВЕТ ПРОНИКАЕТ
ПОЛНОСТЬЮ, ПОГЛОЩАЕТСЯ В
ЭПИДЕРМИСЕ И ДЕРМЕ

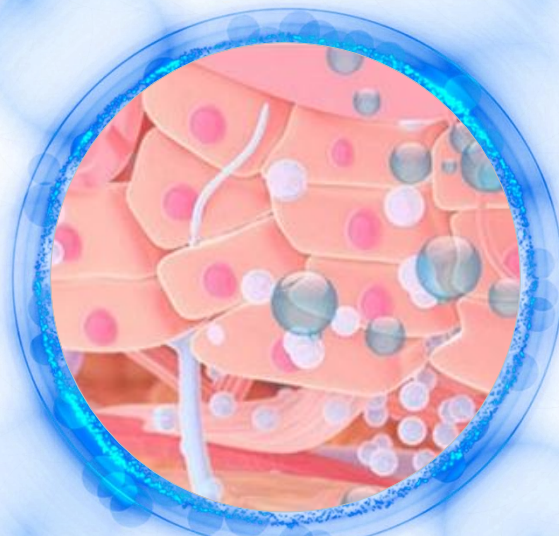

СВЕТОВЫЕ ЧАСТИЦЫ ПРОНИКАЮТ
ЧЕРЕЗ КОЖУ И ОКАЗЫВАЮТ
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

СОЗДАЕТ НА КОЖЕ ОЩУЩЕНИЕ
ПРОХЛАДЫ


РЕЗУЛЬТАТЫ



УМЕНЬШЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЯ




ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ

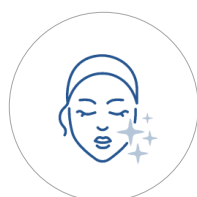

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА
ЛИЦА




СОКРАЩЕНИЕ
ПОР

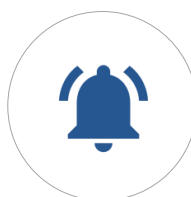

СНИЖЕНИЕ
РЕАКТИВНОСТИ
КОЖИ



АНТИ
БАКТЕРИАЛЬНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

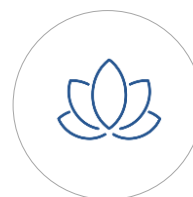

УСПОКАИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ



УСИЛЕНИЕ
СОБСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЫ КОЖИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ



арт. 1301253



ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ
2 ЧАСА



РАБОТАЕТ ОТ
АККУМУЛЯТОРА

- СОЧЕТАЕТ 5 ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
- КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛЮБОГО ТИПА
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ИСКАТЬ РОЗЕТКУ: ПРИБОР РАБОТАЕТ ОТ АККУМУЛЯТОРА
- УДОБНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ХРАНЕНИЯ ПРИБОРА
- ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ КНОПКОЙ.
- КОРПУС АППАРАТА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, ПРИБОР НЕ БОИТСЯ ПОПАДАНИЯ БРЫЗГ.
- ОСНАЩЕН СМАРТ-ТАЙМЕРОМ, ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ СЛЕДИТЬ ЗА ВРЕМЕНЕМ ПРОЦЕДУРЫ.
- ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА: УДОБНО ДЕРЖАТЬ В РУКЕ

3

3 РЕЖИМ
РАБОТЫ



ХРОМОТЕРАПИЯ
ВО ВСЕХ
РЕЖИМАХ



ЧАСТОТА
24КГЦ



НЕ БОИТСЯ
БРЫЗГ ВОДЫ



УДОБНО БРАТЬ
С СОБОЙ



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ



СМАРТ –
ТАЙМЕР



КОМФОРТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОМА



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ
СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

3 РЕЖИМА РАБОТЫ АППАРАТА

РЕЖИМ ULTRA

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ /
ФОНОФОРЕЗ/ МИКРОМАССАЖ



- ДВА ВИДА УЗ: НЕПРЕРЫВНОЕ И ИМПУЛЬСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ

РЕЖИМ CLEAN

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ /
ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ



- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ИЗ ПОР
- УСТРАНЕНИЕ КОМЕДОНОВ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- СОКРАЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЯ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА


РЕЖИМ NUTRITION

МИКРОТОКИ / ФОНОФОРЕЗ/
МИКРОМАССАЖ



- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- СТИМУЛЯЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ
- УВЛАЖНЕНИЕ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ

ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

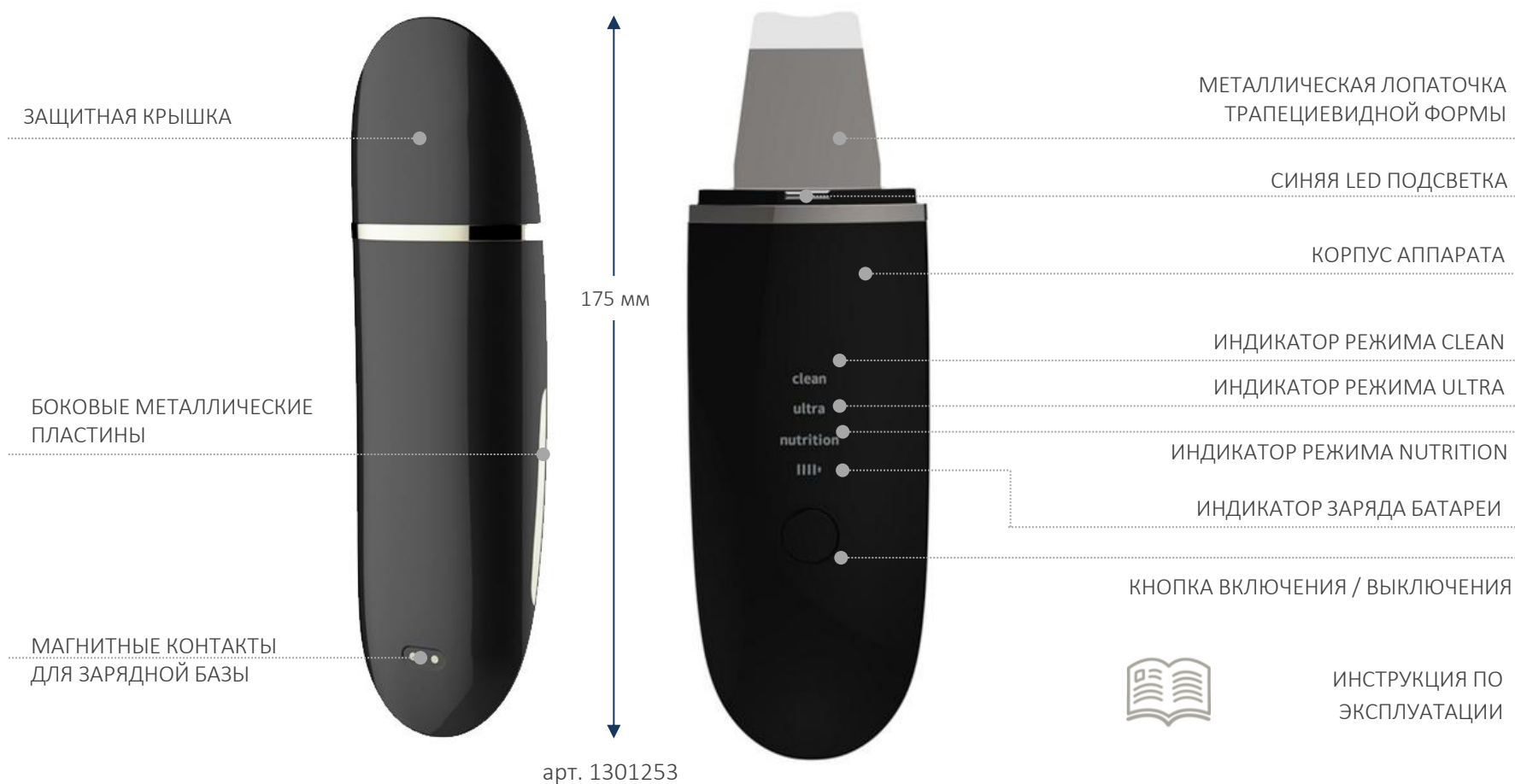

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР С АППАРАТОМ GEZATONE BIO SONIC 1007 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АППАРАТНАЯ КОСМЕТИКА, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ И ПОПАДАЕТ «ТОЧНО В ЦЕЛЬ», УСИЛИВАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АППАРАТА И ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ



ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
СЕНС»

Арт. 4501401
– 150 мл



ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
КОНТРОЛЬ»

Арт. 4501403
– 150 мл

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ЛОСЬОН ДЛЯ
ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ
"ДЕЗИНКРУСТАНТ"



Арт. 4501420А
– 300 мл

ФОНОФОРЕЗ / МИКРОМАССАЖ/ МИКРОТОКИ



КИСЛОРОДНЫЙ
ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Арт. 4501418А
– 300 мл



АКВА-ГЕЛЬ «АЛОЭ
ВЕРА»

Арт. 4501417А
– 300 мл



ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»

Арт. 4501416А
– 300 мл



ГЕЛЬ С
ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ

Арт. 4504006
– 120 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЦЕДУР

 <p>Арт. 1301253</p>	АППАРАТНЫЙ УХОД			
	РЕЖИМ ULTRA		РЕЖИМ CLEAN / ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ / УЗ ПИЛИНГ + ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ	РЕЖИМ NUTRITION / МИКРОТОКИ + ФОНОФОРЕЗ + МИКРОМАССАЖ
	УЗ ПИЛИНГ	ФОНОФОРЕЗ МИКРОМАССАЖ		
ЖИРНАЯ КОЖА РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ	ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ» 4501403	АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА 4501417А	ЛОСЬОН ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ "ДЕЗИНКРУСТАНТ" 4501420А	АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА 4501417А
СУХАЯ КОЖА	ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН СЕНС» 4501401	ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 4504006		КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 4501418А
УВЯДАЮЩАЯ КОЖА МОРЩИНЫ	ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН СЕНС» 4501401	ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАЛИФТ» 4501416А		ГЕЛЬ АКТИВНЫЙ «УЛЬТРАЛИФТ» 4501416А
ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ТОНКАЯ КОЖА	ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН СЕНС» 4501401	ГЕЛЬ С ЭКСТРАКТОМ ИКРЫ 4504006		КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 4501418А
ПИГМЕНТАЦИЯ, НЕРОВНЫЙ КОЖНЫЙ РЕЛЬЕФ	ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН КОНТРОЛЬ» 4501403	АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА 4501417А		АКВА-ГЕЛЬ АЛОЭ-ВЕРА 4501417А



РЕЗУЛЬТАТЫ*

- КОЖА ХОРОШО ОЧИЩЕНА, УПРУГАЯ И В ТОНУСЕ
- УМЕНЬШАЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ И ОТЕКИ
- УДАЛЯЮТСЯ КОМЕДОНЫ, ПОРЫ ХОРОШО ОЧИЩЕНЫ
- КОЖА БОЛЕЕ УВЛАЖНЕННАЯ
- ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ СВЕЖИМ И ОТДОХНУВШИМ, УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ И ТОН КОЖИ
- НОРМАЛИЗУЕТСЯ ВЫРАБОТКА КОЖНОГО САЛА
- СОКРАЩАЮТСЯ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ
- УМЕНЬШАЕТСЯ ЯРКОСТЬ ПИГМЕНТАЦИИ И ЗАСТОЙНЫХ ПЯТЕН

** При регулярном использовании прибора 1-2 раза в неделю.*



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЫШЕ II Б СТЕПЕНИ
- ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОР ИЛИ ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
- ЗАБОЛЕВАНИЯ КРОВИ И СОСУДОВ
- НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ: ОЖОГИ, РАНЫ, ССАДИНЫ, ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
- ХРОНИЧЕСКИЕ ДЕРМАТИТЫ И ДЕРМАТОЗЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
- ОСТРЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ГНОЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
- НАРУШЕНИЯ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НАЛИЧИЕ ИМПЛАНТАТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ ПОД КОЖЕЙ ИЛИ В МЫШЦАХ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИБОРОМ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ), НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ.
- ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ГРИПП, ОРВИ, ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ШНУР USB
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА 24 кГц

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ: НЕ БОЛЕЕ 0,8 Вт/см²

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ:

ULTRA: УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ С ЧАСТОТОЙ 24кГц

CLEAN:

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ С ЧАСТОТОЙ 24 кГц

ПАЧКИ ИМПУЛЬСОВ С АМПЛИТУДОЙ -7В и ЧАСТОТОЙ 100Гц

ЧАСТОТА ПАЧЕК ИМПУЛЬСОВ 1 Гц

NUTRITION:

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ С ЧАСТОТОЙ 24кГц

ПАЧКИ ИМПУЛЬСОВ С АМПЛИТУДОЙ +7В и ЧАСТОТОЙ 100Гц

ЧАСТОТА ПАЧЕК ИМПУЛЬСОВ 1 Гц

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, ТИП ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА: 3,7В 600мАч Li-PoI

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ (СРЕДНЕЕ) 2 часа

ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКЕ 1 ч

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит):

DC 5В, не менее 500мА, Разъем USB тип А

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАЖНОСТИ IPX5. (НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗАРЯДНУЮ БАЗУ)

ПОДСВЕТКА СИНИМ СВЕТОМ, ДЛИНА ВОЛНЫ 465±3 нм

ВЕС 205 г





сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>