

GÉZATONE

The image features a white ultrasonic device with a black tip, shown from multiple angles. The device has labels for 'Lifting', 'Nutrition', and 'Soft peel & Cleansing'. The background is a solid teal color.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

BON-990

БРОССАЖ

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

УЗ ПИЛИНГ

ИОНОФОРЕЗ

УЗ ФОНОФОРЕЗ

УЗ МИКРОМАССАЖ



СЕТЬ МАГАЗИНОВ МАССАЖЕРОВ, КОСМЕТИКИ, ТОВАРОВ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

АППАРАТ **GEZATONE BON 990** ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ А ТАКЖЕ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПИЛИНГА, ФОНОРЕЗА, МИКРОМАССАЖА И ИОНОФОРЕЗА.

ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ КОЖУ, УСИЛИВАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОКАЗЫВАЕТ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.



РАСШИРЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ
ПОРЫ, КОМЕДОНЫ И ЧЕРНЫЕ
ТОЧКИ



ПОВЫШЕННАЯ СЕКРЕЦИЯ
КОЖНОГО САЛА,
ЖИРНЫЙ БЛЕСК



НЕДОСТАТОК ВЛАГИ И
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ШЕЛУШЕНИЕ



ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА,
УСТАЛЫЙ ВИД,
ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА



МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ,
НЕРОВНОСТИ КОЖНОГО
МИКРОРЕЛЬЕФА



СКЛОННОСТЬ К ВОСПАЛЕНИЯМ,
ПОСТАКНЕ,
ЗАСТОЙНЫЕ ПЯТНА



ФУНКЦИИ



В АППАРАТЕ **BON 990** ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОГО ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ НАСАДКАМ. ЩЕТИНКИ ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО СИЛИКОНА ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЧИСТОТУ КОЖИ.

С ПОМОЩЬЮ **BON 990** МОЖНО ТЩАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ МАКИЯЖ, ПРОВЕСТИ УЗ ПИЛИНГ И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРНОГО БЛЕСКА, ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И НЕСОВЕРШЕНСТВ, А ТАКЖЕ СОКРАТИТЬ МЕЛКИЕ МОРЩИНКИ, УЛУЧШИТЬ ЦВЕТ ЛИЦА, СКОРРЕКТИРОВАТЬ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ, УВЛАЖНИТЬ И НАПИТАТЬ КОЖУ, ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ УВЯДАНИЕ.

ПРОЦЕДУРЫ С АППАРАТОМ УЛУЧШАЮТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПОВЫШАЮТ ТОНУС И УСКОРЯЮТ ОБНОВЛЕНИЕ.

Артикул 1301182M

6

ВИДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ



ЕЖЕДНЕВНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ - БРОССАЖ



ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ –
ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ



УЗ ПИЛИНГ



ИОНОФОРЕЗ



УЗ ФОНОФОРЕЗ



УЗ МИКРОМАССАЖ



ОСНОВНЫЕ МЕТОДИКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР BON 990 ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОЖЕ ЛЮБОГО ТИПА ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД И ДЕЛИКАТНОЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ И ДИСКОМФОРТА.



ДЕЛИКАТНЫЙ БРОССАЖ

- УСТРАНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
- ДЕМАКИЯЖ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФОДРЕНАЖА
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ.



УЗ ПИЛИНГ

- ЧИЩЕНИЕ КОЖИ ЛИЦА
- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ ПОР, ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ САЛЬНЫХ ПРОБОК
- УДАЛЕНИЕ ОТМЕРШИХ КЛЕТОК
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- РЕГУЛЯЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, КОМЕДОНОВ И ИЗБЫТКА КОЖНОГО САЛА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- УСИЛЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
- СОКРАЩЕНИЕ ПОР И НОРМАЛИЗАЦИЯ САЛООТДЕЛЕНИЯ



ИОНОФОРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПО.
- СОКРАЩЕНИЕ МОРЩИН
- ПРОТИВООТЕЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДЕТОКС
- ТОНИЗАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЕ ПОР
- КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН И ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА



УЗ ФОНОФОРЕЗ

- ГЛУБОКОЕ ВВЕДЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
- УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ
- СТИМУЛЯЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
- УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ КОЖИ.



УЗ МИКРОМАССАЖ

- УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА КОЖИ
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УКРЕПЛЕНИЕ МЕЛКИХ СОСУДОВ
- СОКРАЩЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР



ДЕЛИКАТНЫЙ БРОССАЖ



ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАСАДОК ИЗ МЕДИЦИНСКОГО ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО СИЛИКОНА УДАЛЯЕТ МАКИЯЖ, ПОТ, ПЫЛЬ, ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ. ПОМОГАЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВ И ЧЕРНЫХ ТОЧЕК, УСТРАЯЕТ ИЗБЫТОК КОЖНОГО САЛА.

ВИБРАЦИЯ УСИЛИВАЕТ ОЧИЩАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ .


ДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ СТИМУЛИРУЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ, ОКАЗЫВАЕТ ТОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ , СОКРАЩАЕТ РАСШИРЕННЫЕ ПОРЫ, УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕССЫ ДЕТОКСИКАЦИИ, ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ ОТЕЧНОСТЬ И УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА.

Артикул 1301182M


ЭФФЕКТЫ




ДЕЛИКАТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

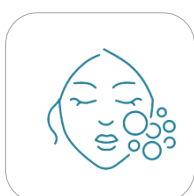

ДЕМАКИЯЖ

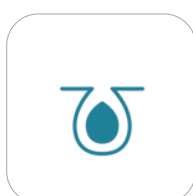

ПРОФИЛАКТИКА
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»

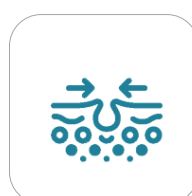

СОКРАЩЕНИЕ
ПОР




ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА КОЖИ



ПРОТИВООТЕЧНОЕ
ДЕЙСТВИЕ




ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ

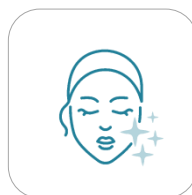

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

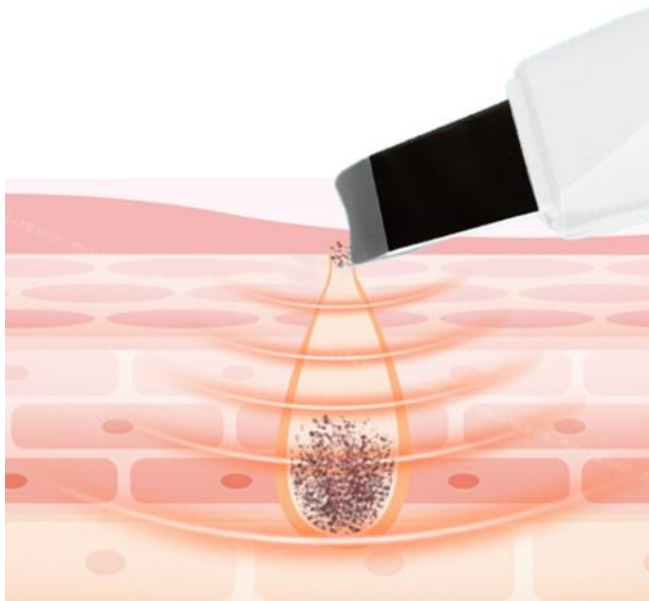

ЗА СЧЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ **УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ** ВОЗНИКАЕТ ЭФФЕКТ РАЗРЫХЛЕНИЯ И ОТШЕЛУШИВАНИЯ ОРОГОВЕВШИХ КЛЕТОК.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ РАЗРЫВАЮТ СВЯЗИ МЕЖДУ КЛЕТКАМИ С НАРУШЕННЫМ ОБМЕНОМ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ОТ РОГОВЫХ ЧЕШУЕК.


ДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКА УСИЛИВАЕТСЯ ГЕЛЕМ ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА.

В КОСМЕТИЧЕСКОМ ГЕЛЕ ОБРАЗУЮТСЯ ПУЗЫРЬКИ, КОТОРЫЕ ВМЕСТЕ С ЕГО АКТИВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ЭМУЛЬГИРУЮТ И УДАЛЯЮТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ПОР И С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ.

ЭФФЕКТЫ



КОМФОРТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ

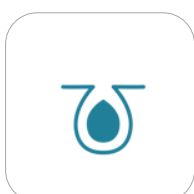

УСТРАНЕНИЕ
КОМЕДОНОВ



ОЧИЩЕНИЕ И
СОКРАЩЕНИЕ ПОР



ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ




ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



СОКРАЩЕНИЕ
САЛООТДЕЛЕНИЯ




ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА КОЖИ

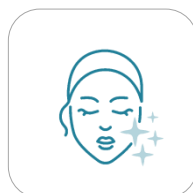

УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ

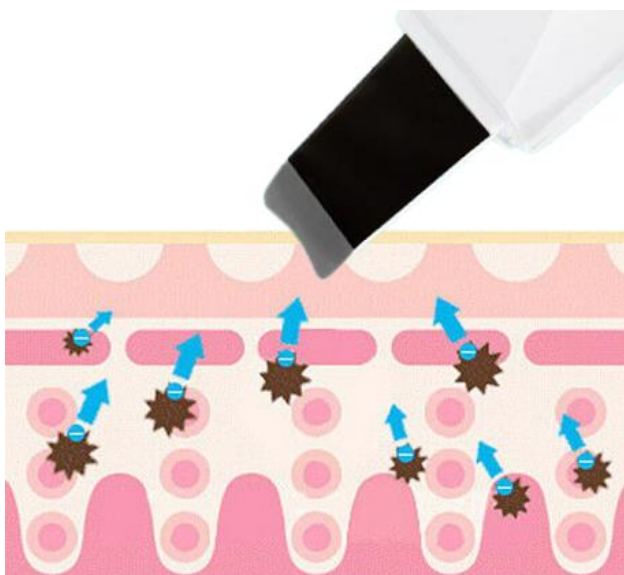

ИОННОЕ ОЧИЩЕНИЕ / ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ - ОМЫЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ КОЖНОГО САЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЛОСЬОНА-ДЕЗИНКРУСТАНТА.

ЛОСЬОН ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ДОПОЛНЯЕТ ДЕЙСТВИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ТОКА И ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДОЙ.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТОКА И ЛОСЬОНА, ПРОИСХОДИТ РЕАКЦИЯ ОМЫЛЕНИЯ КОЖНОГО САЛА, КОМЕДОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЫЛО И ЛЕГКО ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОР.

ЭФФЕКТЫ



СОКРАЩЕНИЕ
ПОР



УСТРАНЕНИЕ
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»




ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ БЕЗ ТРАВМЫ



УДАЛЕНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ



НОРМАЛИЗАЦИЯ
САЛООТДЕЛЕНИЯ

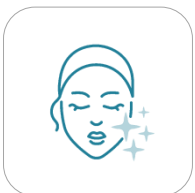

УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА




ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЙ



УСИЛЕНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

ИОНОФОРЕЗ

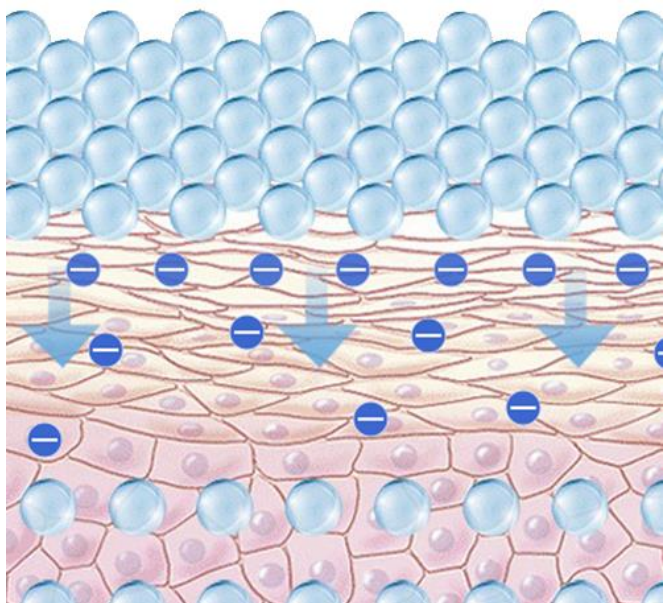


ИОНОФОРЕЗ = ВОЗДЕЙСТВИЕ
ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ + КОСМЕТИЧЕСКОЕ
СРЕДСТВО.

ЗАРЯЖЕННЫЕ ИОНЫ НАПРАВЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ, ПЕРЕДВИГАЯСЬ В ТКАНЯХ,
УСКОРЯЮТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕССЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

ВЕЩЕСТВА В ИОНИЗИРОВАННОМ
СОСТОЯНИИ БОЛЕЕ АКТИВНЫ.
ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ
КОСМЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ВОЗНИКАЕТ
ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ «ДЕПО» В ТКАНЯХ.

ЭФФЕКТЫ

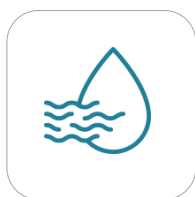

УВЛАЖНЕНИЕ
И ПИТАНИЕ КОЖИ



УСИЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
КОСМЕТИКИ



ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА ЛИЦА



СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ, ДЕТОКС




УМЕНЬШЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР



УСКОРЕНИЕ
РЕГЕНЕРАЦИИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФОНОФОРЕЗ И МИКРОМАССАЖ

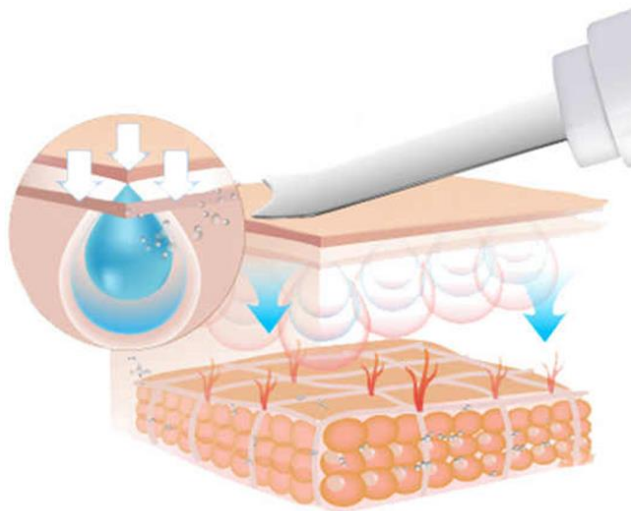

УЛЬТРАЗВУК ПОВЫШАЕТ АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ, СПОСОБСТВУЕТ ИХ ГЛУБОКОМУ ПРОНИКНОВЕНИЮ, УДЛИНЕНИЮ ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЯ.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОНИКАЮТ В ЭПИДЕРМИС И ВЕРХНИЕ СЛОИ ДЕРМЫ ЧЕРЕЗ ВЫВОДНЫЕ ПРОТОКИ САЛЬНЫХ И ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ СОЧЕТАНИЯ ДЕЙСТВИЯ КОСМЕТИКИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ (МЕХАНИЧЕСКОГО, ТЕПЛОВОГО) КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ УСИЛИВАЮТСЯ И СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ.

ЭФФЕКТЫ




ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА
И УПРУГОСТИ КОЖИ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ

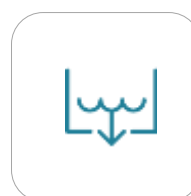


СОКРАЩЕНИЕ
ОТЕЧНОСТИ



УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА
ЛИЦА



УСКОРЕНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

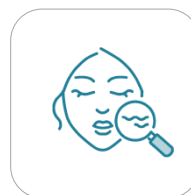

КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



СОКРАЩЕНИЕ
ВОСПАЛЕНИЯ

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

SOFT PEEL & CLEANSING / РЕЖИМ ОЧИЩЕНИЯ

1



- ПОВЕРХНОСТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ
- УСТРАНЕНИЕ КОМЕДОНОВ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЗ ПОР
- УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА ПОР
- ВЫРАВНИВАНИЕ КОЖНОГО РЕЛЬЕФА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА

NUTRITION / РЕЖИМ ПИТАНИЯ

2



- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА
- УКРЕПЛЕНИЕ МЕЛКИХ СОСУДОВ
- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- НОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ САЛООТДЕЛЕНИЯ
- УМЕНЬШЕНИЕ ПОР
- СОКРАЩЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

LIFTING / РЕЖИМ ЛИФТИНГА

3



- ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА И УПРУГОСТИ КОЖИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН
- УКРЕПЛЕНИЕ И ПОДТЯЖКА
- УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ЛИЦА И ТОНА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ
- УМЕНЬШЕНИЕ РУБЦОВ И ШРАМОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



АППАРАТ ИМЕЕТ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВОДИМЫХ ПРОЦЕДУР.

ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ПОЗВОЛЯЕТ УСТРАНИТЬ БОЛЕЕ 96% ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ, ПРЕДОТВРАЩАЯ ПОЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕНСТВ, УЛУЧШАЕТ СОСТОЯНИЕ КОЖИ ЛЮБОГО ТИПА.



Артикул 1301182М

6

6 ВИДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ



РАБОТАЕТ
ОТ АККУМУЛЯТОРА

1

УПРАВЛЕНИЕ
1 КНОПКОЙ



УДОБНО
БРАТЬ С СОБОЙ

3

3 РЕЖИМА
РАБОТЫ

- **РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ.** СТОИМОСТЬ АППАРАТА, КОТОРЫЙ ЗАМЕНИТ НЕСКОЛЬКО ПРИБОРОВ И ПРОСЛУЖИТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ДЕШЕВЛЕ ОДНОГО ПОХОДА В САЛОН.
- **МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО:** БЕСПРОВОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРИВЯЗКИ К ЭЛЕКТРО-РОЗЕТКЕ.
- ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДЕМАКИЯЖ СТАНЕТ УДОВОЛЬСТВИЕМ
- **КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** ДОМА, НА ОТДЫХЕ И В ПОЕЗДКАХ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТРИ РЕЖИМА РАБОТЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ КОМПЛЕКСНЫЕ УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ. ПРИБОР ИМЕЕТ ЭРГОНОМИЧНУЮ ФОРМУ, ЕГО ЛЕГКО ДЕРЖАТЬ, РУКА НЕ УСТАЕТ ВО ВРЕМЯ СЕАНСА.



ДВА ВИДА СИЛИКОНОВЫХ НАСАДОК

МЕЛКИЕ ЩЕТИНКИ ПРИ КОЛЕБАНИИ УДАЛЯЮТ ОТМЕРШИЕ КЛЕТКИ И ИЗБЫТОК КОЖНОГО САЛА, НАСАДКА С ВОЛНИСТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО МАССИРУЕТ КОЖУ, СТИМУЛИРУЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ЛИМФОДРЕНАЖ, ПОВЫШАЕТ ТОНУС КОЖИ.


ДЛИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

ПОЛНОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА ХВАТАЕТ НА 1 ЧАС НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ АППАРАТ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ МОЖНО НЕСКОЛЬКО ДЕЙ. USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ В КОМПЛЕКТЕ.



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ, СМЕНА ПРОГРАММ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ НАЖАТИЕМ 1 КНОПКИ. ПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СПЦИАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

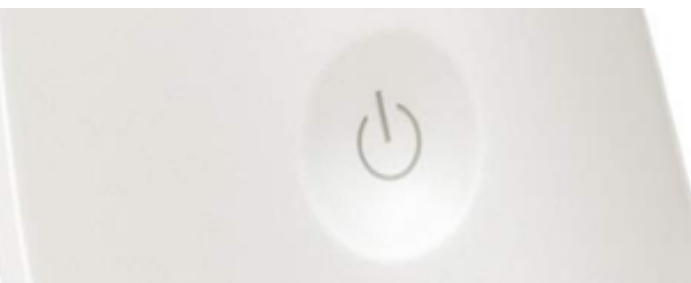


2 УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В КАЖДОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ АППАРАТА ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ЧТО ПОМОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРЫ С КОМФОРТОМ



ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

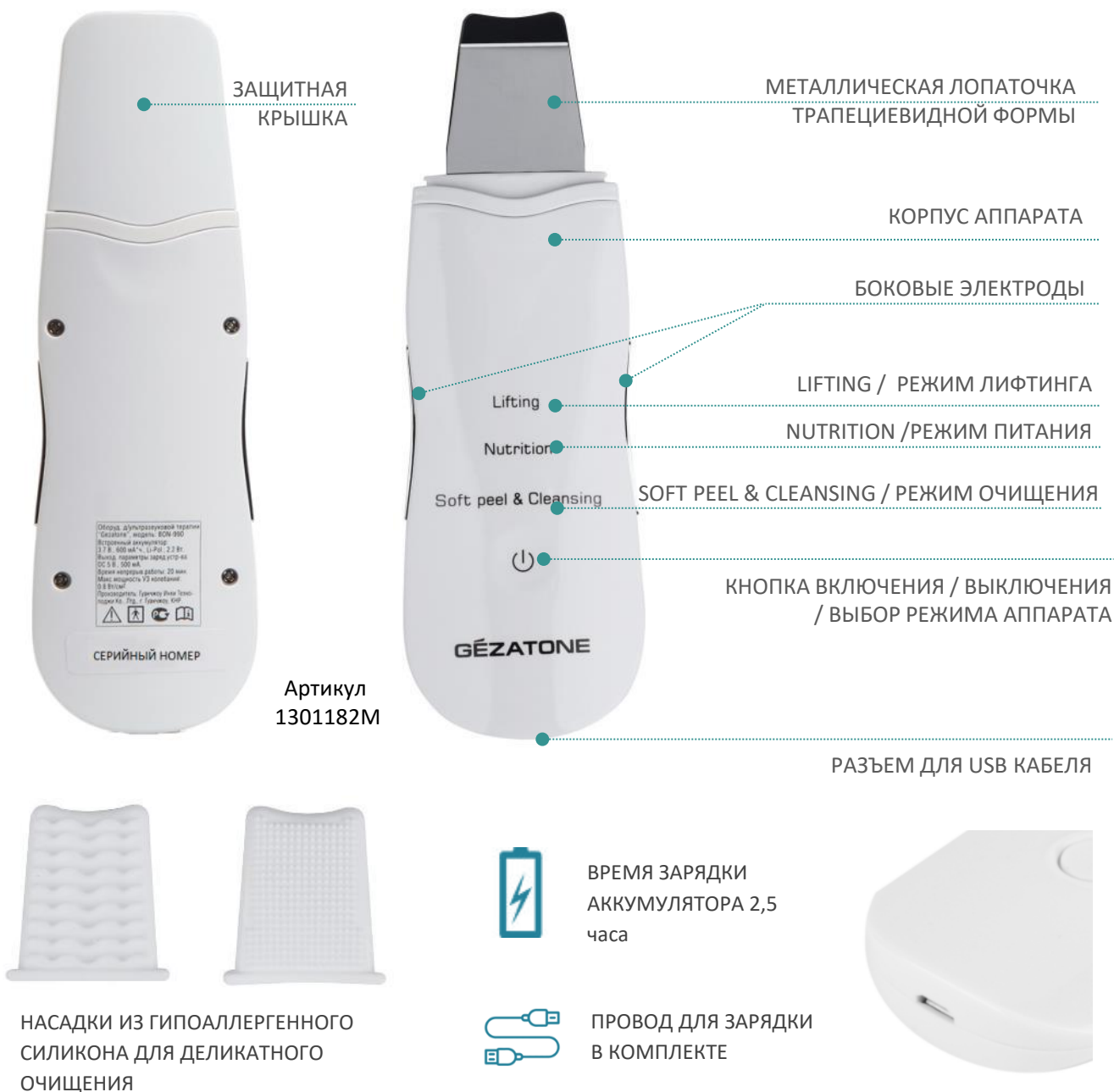

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ



1

НАДЕНЬТЕ СИЛИКОНОВУЮ
НАСАДКУ, НАНЕСИТЕ НА
НАСАДКУ СРЕДСТВО ДЛЯ
ДЕМАКИЯЖА.



2

СЛЕГКА НАМОЧИТЕ
ЛИЦО ВОДОЙ



3

ВКЛЮЧИТЕ ПРИБОР.
SOFT PEEL & CLEANSING
ОЧИЩАЙТЕ КОЖУ ПО
МАССАЖНЫМ ЛИНИЯМ НА
КАЖДОЙ ЗОНЕ ЛИЦА.



4

СМОЙТЕ ОСТАТКИ
ОЧИЩАЮЩЕГО СРЕДСТВА



5

ПРОТИРИТЕ ЛИЦО
ТОНИКОМ ИЛИ ЛОСЬОНОМ



6

ЛЕГКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ
НАНЕСИТЕ КРЕМ ПО ТИПУ
КОЖИ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД



1

ОЧИСТИТЕ ЛИЦО ПРИ ПОМОЩИ СИЛИКОНОВОЙ НАСАДКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА



2

ИСПОЛЬЗУЯ ГЕЛЬ ДЛЯ УЗ ПИЛИНГА ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ



3

СМОЙТЕ ОСТАТКИ ОЧИЩАЮЩЕГО ПРЕПАРАТА, ПРОТРИТЕ ЛИЦО ТОНИКОМ ИЛИ ЛОСЬОНОМ



4

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ АППАРАТНЫЙ ГЕЛЬ, ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ В РЕЖИМЕ **NUTRITION** ДЕРЖИТЕ ЛОПАТКУ ВЫПУКЛОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ ПОД УГЛОМ 45°



5

НАНЕСИТЕ НА КОЖУ АППАРАТНЫЙ ГЕЛЬ, ПРОВЕДИТЕ ПРОЦЕДУРУ В РЕЖИМЕ **LIFTING** ДЕРЖИТЕ ЛОПАТКУ ВЫПУКЛОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ ПОД УГЛОМ 45°



6

ПОСЛЕ СЕАНСА СМОЙТЕ ОСТАТКИ ЕГЛЯНАНЕСИТЕ НА ЛИЦО МАСКУ, СЫВОРОТКУ И КРЕМ ПО ТИПУ КОЖИ.



КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОЧИЩЕНИЯ

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ-МУСС



4516072 – 120 мл

МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ И
СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516503 – 120 мл

ОЧИЩАЮЩАЯ
КИСЛОРОДНАЯ ПЕНКА



4516076 – 150 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНИК
«HYDRO ACTIVE 30 h»



4516079 – 120 мл

МАТИРУЮЩИЙ ТОНИК С
ПРЕБИОТИКОМ ДЛЯ ЖИРНОЙ
И СМЕШАННОЙ КОЖИ



4516501 - 120 мл

ГИАЛУРОНОВЫЙ
ТОНИК



4516032 – 120 мл

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА

ГЕЛЬ «УЛЬТРАКЛИН
КОНТРОЛЬ»



4501422AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАКЛИН СЕНС»



4501424AR – 250 мл

КИСЛОРОДНЫЙ ГЕЛЬ С
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



4501418AR – 250 мл

АКВА-ГЕЛЬ
АЛОЭ-ВЕРА



4501417AR – 250 мл

ГЕЛЬ
«УЛЬТРАЛИФТ»



4501416AR – 250 мл

ГЕЛЬ С ИКРОЙ



4504006K – 120 мл
4501428AR – 250 мл


РЕЗУЛЬТАТЫ*

КОЖА ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ОТМЕРШИХ КЛЕТОК, СОКРАЩАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ ПОРЫ.

ПОВЫШАЕТСЯ ТОНУС И УПРУГОСТЬ, УЛУЧШАЕТСЯ ЦВЕТ ЛИЦА, СОКРАЩАЮТСЯ МОРЩИНКИ И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. КОЖА НАПОЛНЯЕТСЯ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, СТАНОВИТСЯ МЯГКОЙ И НЕЖНОЙ.



ДЕЛИКАТНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ ПОР

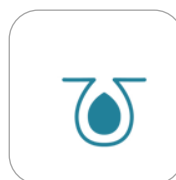

УСТРАНЕНИЕ
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»
ПРОФИЛАКТИКА
ВОСПАЛЕНИЯ



ВЫРАВНИВАНИЕ
МИКРОРЕЛЬЕФА



ПОВЫШЕНИЕ
ТОНУСА
И УПРУГОСТИ КОЖИ



СОКРАЩЕНИЕ
РАСШИРЕННЫХ ПОР



ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОСМЕТИКИ



УЛУЧШЕНИЕ
ЦВЕТА
ЛИЦА



КОРРЕКЦИЯ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ



УВЛАЖНЕНИЕ И
ПИТАНИЕ КОЖИ

** Результаты зависят от исходного состояния кожи, возраста и могут быть достигнуты только при регулярном использовании*

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



- ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
- ДЕРМАТИТЫ, ДЕРМАТОЗЫ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЭКЗЕМЫ, ПСОРИАЗ И ДР..
- АКНЕ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ, ГНОЙНИЧКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
- РАЗЛИЧНЫЕ ТРАВМЫ КОЖИ: ЦАРАПИНЫ, ПОРЕЗЫ, ГЕМАТОМЫ, ОЖОГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ)
- НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА КОЖЕ В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА
- НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
- ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЭПИЛЕПСИЯ
- НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОСЛЕ ТРАВМИРУЮЩИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
- БЕРЕМЕННОСТЬ
- НОШЕНИЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТОВ
- НЕПЕРЕНOSИМОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ТОКОВ.
- АРИТМИИ, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА И СОСУДОВ, НАРУШЕНИЕ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ ПОДКОЖНЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ОБЛАСТИ ПРОЦЕДУРЫ (ЗОЛОТЫЕ НИТИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБКИ). ЗУБНЫЕ КОРОНКИ, ШТИФТЫ И БРЕКЕТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ.
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ ПРИ ГРИППЕ, ОРВИ, ОБОСТРЕНИИ ГЕРПЕСА И ЛИХОРАДОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСТОТА УЛЬТРАЗВУКА 25 КГЦ	25 кгц
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	не более 0,8 Вт/см ²
РЕЖИМ "ОЧИЩЕНИЯ И ПИЛИНГА" SOFT PEEL & CLEANSING	
НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ (постоянный ток)	-0,7...-1,0 В
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА В РЕЖИМЕ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ	0,8 мс
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА В РЕЖИМЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ	19, 2 мс
РЕЖИМ "ПИТАНИЕ " (NUTRITION	
НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ (постоянный ток)	+0,7...+1,0 В
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА В РЕЖИМЕ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ	0,9 мс
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА В РЕЖИМЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ	7,3 мс
РЕЖИМ "ЛИФТИНГ" LIFTING	
НАПРЯЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОДЕ БИОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ ЧАСТОТОЙ 1...1,5 Гц	+/- 1,4...2 В
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА В РЕЖИМЕ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ	0,8 мс
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА УЛЬТРАЗВУКА В РЕЖИМЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ	11,6 мс
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, ТИП ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	3,7 В 600 мА Li-PoL
ВРЕМЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ	2,5 часа
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит)	DC 5В, не менее 500 мА, разъём USB, тип А.
КЛАСС ЗАЩИТЫ	II/BF.
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ	210x150x35 мм
ВЕС В УПАКОВКЕ	0,3 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор для ухода и массажа лица Gezatone BON-990 Оборудование для ультразвуковой терапии Gezatone - 1шт

Шнур USB - 1шт.

Силиконовая насадка - 2шт.

Инструкция по эксплуатации - 1шт.

Гарантийный талон - 1шт.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



GÉZATONE



Москва 8 (495) 120-10-80
регионы РФ: 8(800) 500-95-94
(звонок бесплатный)



<http://www.sozv.ru/>



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>